

# Neater Mover



**ERGO**  
**DIFFUSION**



**L'ASSISTANCE AU GESTE**

71 AVENUE ALPHONSE LEGAULT

BP 97405 - 35704 BRUZ CEDEX

[contact@ergo-diffusion.com](mailto:contact@ergo-diffusion.com)

02.99.50.80.57 / [www.ergo-diffusion.com](http://www.ergo-diffusion.com)

## Description

Le **Neater Mover** a été développé pour les personnes qui ont du mal à utiliser une tasse ou une paille conventionnelle et permet aux gens d'utiliser indépendamment une paille flexible loin de leur visage.

Un contacteur à distance est pressé par l'utilisateur pour apporter la paille vers la bouche.

Tout appareil comme celui-ci peut causer l'étouffement. Pour cette raison, il n'est recommandé que pour chaque individu après une évaluation par un orthophoniste.

Le **Neater Mover** permet aux gens de boire des liquides quand ils le veulent. Il peut être utilisé en combinaison avec le **Neater Drinker électrique** qui pompe les aliments liquides ou en purée.



## Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et en particulier avant de faire des ajustements. Une utilisation et un ajustement incorrects pourraient endommager l'appareil et/ou rendre son utilisation dangereuse d'une manière ou d'une autre.
- Le **Neater Mover** ne doit être utilisé que pour boire des liquides consommables.
- Il ne doit pas être utilisé par les personnes ayant des difficultés à avaler ou qui sont susceptibles de s'étouffer, sauf sous la supervision d'un orthophoniste formé.
- Les boissons ne doivent pas être brûlantes.
- Votre bouche doit toujours être plus haute que la tasse ou siphonner peut se produire et provoquer l'étouffement.
- Nettoyez toutes les pièces avant utilisation - en particulier les tubes flexibles et vérifiez qu'aucune fissure n'est apparue dans le tube.
- Prenez soin de ne pas coller la paille dans votre œil ou dans le dos de votre gorge.
- Les commutateurs fournis ne doivent être utilisés qu'avec l'appareil.
- La flexion répétée du fil au même endroit peut le faire se casser



### Support de flexible - B

Tournez l'anneau inférieur pour ajuster la plage de mouvement. La torsion dans le sens de la serrure augmentera et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminuera la portée.

### Clip de paille - A


Cela maintient votre paille en place. Il a de la place pour 2 pailles afin que vous puissiez prendre 2 verres si vous le souhaitez.

### Contacteur externe - D

L'interrupteur standard est très léger et peut être positionné partout où il est pratique ; fourni avec un anneau Velcro

### Pince

Sécurise le Neater Mover sur une table.

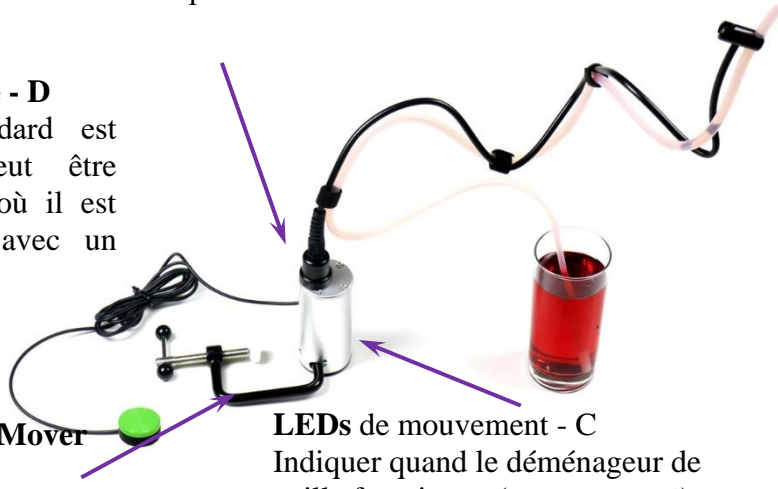

**LEDs de mouvement - C**  
Indiquer quand le déménageur de paille fonctionne (**rouge** et **vert**).

### Flexible

Clip dans des tubes flexibles. Pliez à une position pratique pour l'utilisateur. **ÉVITEZ LES VIRAGES POINTUS ET NE TIREZ PAS** fort sur le **flexible** car cela peut l'endommager.

**Port de charge de batterie – F**  
Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni avec l'appareil.

### À utiliser

1. Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé à une table ou à une pièce jointe pour fauteuil roulant (disponible séparément).
2. Couper la paille pliée dans le **clip de paille (A)**. Utilisez le Velcro pour aider à tenir la paille.
3. Branchez le **commutateur externe (D)** dans la prise (**H**).
4. Appuyez sur le **commutateur externe (D)** pour déplacer la paille dans un sens. Lorsque vous appuyez à nouveau, la paille se déplacera dans la direction opposée. Lorsque la paille se déplace, les LED de mouvement (**C**) s'allument, alternant **rouge** et **vert**.
5. Tournez l'anneau inférieur du support de bras **courbé (B)** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la gamme de mouvement, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire. Réglez ceci lorsque le clip de paille est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajustez-vous au besoin pour obtenir la bonne plage pour vous.
6. Déplacez la tête de paille vers une position de bouche confortable.


NB : Si l'une des LED de mouvement (**C**) est allumée mais que l'appareil ne bouge pas, quelque chose est coincé. Débranchez le **contacteur externe (D)** et contactez le fournisseur.

### Dépannage

- Si l'une des LED de **mouvement (C)** est allumée mais que l'appareil ne bouge pas, quelque chose est coincé. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions. Débranchez le **contacteur externe (D)**, chargez-le complètement, puis réessayez. Si cela ne résout pas le problème, contactez le fournisseur.
- Si l'appareil devient lent ou ne bouge pas, la batterie doit être chargée.
- Si le chargeur est branché mais que la **LED de charge (G)** n'est pas allumée, la batterie peut être vide. Essayez d'attendre une demi-heure. Si rien ne change, la batterie peut avoir besoin de remplacement, c'est la norme pour les batteries lithium-ion qui ont une durée de vie prévue de 3 ans. Un nouveau pack de batterie et un nouveau service de remplacement sont à voir avec votre fournisseur Neater.

### À charger

- Pour charger la prise USB-C dans le port de charge (F). Branchez le **chargeur (E)** dans une prise principale. Un chargeur sera fourni.
- La **LED de charge (G)** s'allume en **rouge** lors de la charge. Cela passera au **bleu** lorsqu'il est entièrement chargé.
- Le **Neater Mover** n'a besoin d'être chargé qu'une fois par semaine, selon l'utilisation.
- Vous pouvez utiliser le **Neater Mover** lorsqu'il est chargé.

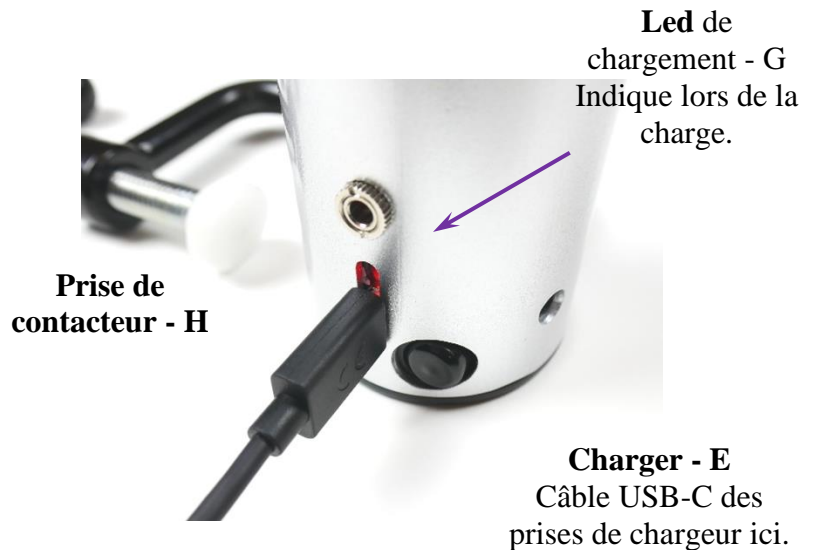

### Nettoyage

- Rincez toujours les tubes flexibles et nettoyez avant l'utilisation et immédiatement après utilisation.
- Utilisez une solution de stérilisation et rincez soigneusement.
- Une **brosse de nettoyage de paille** est fournie (**ND-SC**).
- D'autres parties de l'appareil peuvent être nettoyées ; rinçage de tout détergent utilisé.
- Certains produits chimiques peuvent attaquer le boîtier en plastique.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

### Fonctionnalités supplémentaires



Cette vis peut être enlevée pour activer différentes options d'installation.

Ces trous permettent d'autres façons de monter l'appareil. Ils sont compatibles avec un fauteuil roulant.



### **Interrupteur Jack - H**

Convient aux interrupteurs standard avec prise de prise de 3,5 mm, y compris les interrupteurs de la tête ou du pied.

### Élimination – RoHS et DEEE

Cet équipement est exempté de la directive RoHS (en tant qu'appareils médicaux) tant qu'il est utilisé pour aider les personnes handicapées. En vertu de la directive sur les DEEE, il ne devrait pas être éliminé dans le flux normal de déchets, mais être placé avec une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques (ou retourné à Neater Solutions Limited). Numéro d'enregistrement du producteur : WEE/GB0074UR/PRO

